

# VITA AKZENT® Plus

Hướng Dẫn Nhanh - Chroma Stains



CTE độc lập - stain màu  
kiểm soát sắc độ



VITA shade, VITA made.

**VITA**

## > VITA AKZENT®Plus - TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM


### **CHROMA STAINS là:**

- Bột stain CTE độc lập sử dụng cho tất cả các loại sứ đắp tiêu chuẩn, zirconia nguyên khối, silicat hoặc sứ khối.

### **Những lợi ích đem đến từ CHROMA STAINS:**

- Dễ thích nghi sắc độ trong các nhóm màu tương ứng
- Quy trình đặc trưng nổi trội nhưng ứng dụng đơn giản
- Hiệu quả thẩm mỹ cao thông qua việc quét trên bề mặt


## > HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

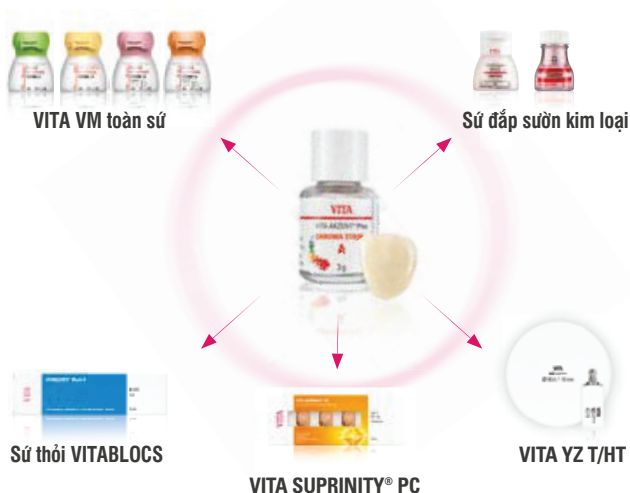



## VITA AKZENT®Plus – CHROMA STAINS

### ➤ Quét CHROMA STAINS lên vùng xác định trên bề mặt

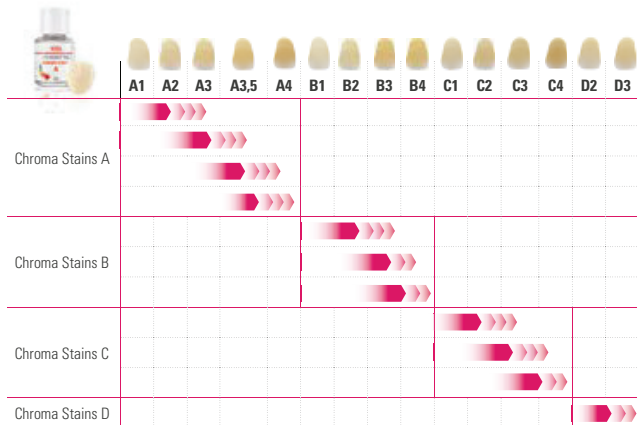

**!** **Ghi chú:** Bổ sung sắc độ chỉ áp dụng trong một nhóm màu.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS đã được phát triển để tăng cường độ trong một nhóm màu. Cường độ của các màu stain khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của hỗn hợp. Phục hình quét lớp càng dày thì màu càng sậm.

## VITA AKZENT® Plus – CHROMA STAINS

### Quét thử mẫu phục hình răng cửa trước.




1 - Xác định màu



Màu răng phục hình không khớp với răng thật.



2 - Quét lớp CHROMA Stains nướng sữa hoặc kết hợp với VITA AKZENT Plus Glaze (xem bảng nhiệt độ).

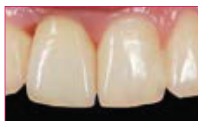

Mẫu răng hoàn toàn phù hợp với màu răng thật

## 📄 Kiểm soát độ sậm

### ▶ Pha loãng



Bột

1 : 2



Nước

### Pha đặc



Bột

1 : 1



Nước

A2



Tình huống ban đầu

A2



Quét

CHROMA STAIN



Kết quả cuối sau khi nung



Tình huống ban đầu

Thêm màu

Tình huống ban đầu

Thêm màu

**!** **Ghi chú:** Cần tránh hình thành các vùng trắng. Nếu bạn muốn phục hình sậm màu hơn, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện hai quy trình nung hai lần.


## VITA AKZENT®Plus - Bảng nhiệt độ

### Bảng nhiệt độ đề xuất

**Nướng bóng DẠNG BỘT** – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Predry. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	400	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	400	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	500	4.00		80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
Stains fixation firing	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-



 **Ghi chú:** Tất cả các loại phục hình cứng có thể làm bóng bằng VITA AKZENT Plus Glaze LT. Trong những trường hợp này, nhiệt độ có thể giảm xuống 750°C.



## HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Câu hỏi về giải pháp cho sản phẩm VITA? **Chuyên gia kỹ thuật và cố vấn kỹ thuật** nha khoa Ralf Mehlín (DT) và Daniel Schneider (DT) có thể giải đáp thắc mắc của bạn tại đây

- ▶ Phone +49(0)7761/56 22 22
- E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)
- 8 a.m. to 5 p.m. CET



## HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thắc mắc về quy trình và giải pháp cho sản phẩm? Bạn có thể tìm được giải đáp trực tuyến bằng các đoạn **Video, Hỏi/đáp nhanh và Hướng dẫn điện tử.**

Để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo trong cuốn **Hướng dẫn sử dụng VITA AKZENT Plus**

- ▶ [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)
- ▶ [www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

10375E – 0217 (X) S – Version (01)



Tiếp thị & Phân phối chính thức:

**N.K.LUCK** VIỆT NAM

CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 3862 0090 - 5412 2662 | Fax: (028) 3862 0080

Hotline **0919 118 798**  **rangsuvita**