

VITA YZ® GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Giải pháp chuẩn xác, hiệu quả và màu sắc chính xác phục hình Zirconia



VITA shade determination

VITA shade communication

VITA shade reproduction

VITA shade control

Date of issue: 06.18



VITA—perfect match.

VITA

XÁC ĐỊNH
MÀU

CHỌN PHÔI

QUY TRÌNH CAD/CAM

XỬ LÝ MÀU*

NUNG SƯỜN

PHỦ SỬ*

CÁ NHÂN HÓA

NUNG SỬ

*) Optional process steps: Staining is not necessary for pre-stained blanks. Veneering is not necessary in the monolithic restoration design.

CONCEPT AND BENEFITS

RESTORATION CONCEPTS

FACTS AND FEATURES

SYSTEMS AND COMPONENTS

Đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn chất lượng



VITAYZ® GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

- Với các phiên bản phiôi trắng, nhuộm màu sẵn và đa lớp, cũng như các thành phần kết hợp, luôn luôn là giải pháp lý tưởng cho các ca thực hiện thẩm mỹ
- Với các phiôi đã được xử lý màu sẵn (màu, đa lớp), luôn bảo đảm chuẩn hiệu quả về thẩm mỹ, đồng thời giảm năng suất sản xuất.

*) VITA YZ ST^{Multicolor} and VITA YZ XT^{Multicolor} are expected to be available starting in fall/winter of 2018

HÀNG LOẠT CÁC LÝ DO ĐÁNG TIN CẬY MÀU PHỤC HÌNH

Sự kết hợp lý tưởng để tái tạo màu sắc đáng tin cậy

**Xác định màu
+ Lựa chọn phôi**

**Dung dịch màu
(tùy chọn)**

**Phủ sứ
(tùy chọn)**

Cá nhân hóa

VITAYZ®SOLUTIONS

- là chuỗi vật liệu tích hợp các thành phần được phối hợp hoàn hảo cho việc tái tạo màu sắc tự nhiên
- bao gồm dung dịch nhuộm màu, stain màu và bóng cho phục hình phủ sứ và lò sứ nung bóng


Màu như răng thật (đa lớp/ Màu) Phôi màu cho phục hình răng hiệu quả.



VITAYZ®SOLUTIONS

- đem đến hiệu quả màu sắc cho phục hình răng, nhờ đĩa màu (đa lớp) màu sắc phù hợp với bảng so màu VITA Classic A1 – D4®

Độ trong mờ khác nhau của nhóm phôi VITA YZ

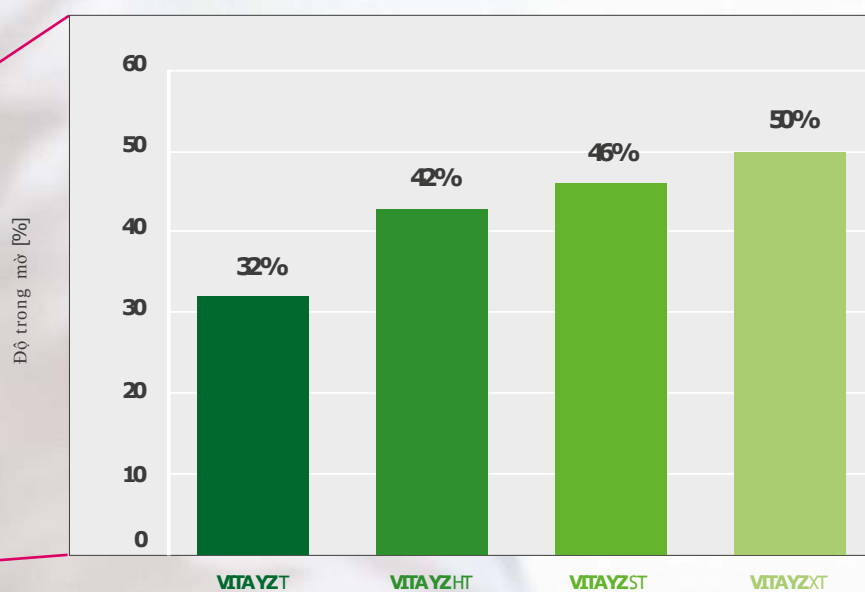


Source: External study, Measuring translucency using a spectrophotometer, Tosoh Corporation, (Technical Report, 08/2017, [1] see back of brochure)

VITAYZ®SOLUTIONS

- đem lại kết quả sinh động, tự nhiên nhờ vào đĩa phôi bốn cấp độ trong mờ (T,HT,ST,XT)
- đạt độ trong mờ (50%) với phôi VITA YZ XT có thể so sánh với đóng sứ truyền thống, dựa trên công nghệ đo lường.

Tổng quan về các phiên bản, quy cách và màu sắc

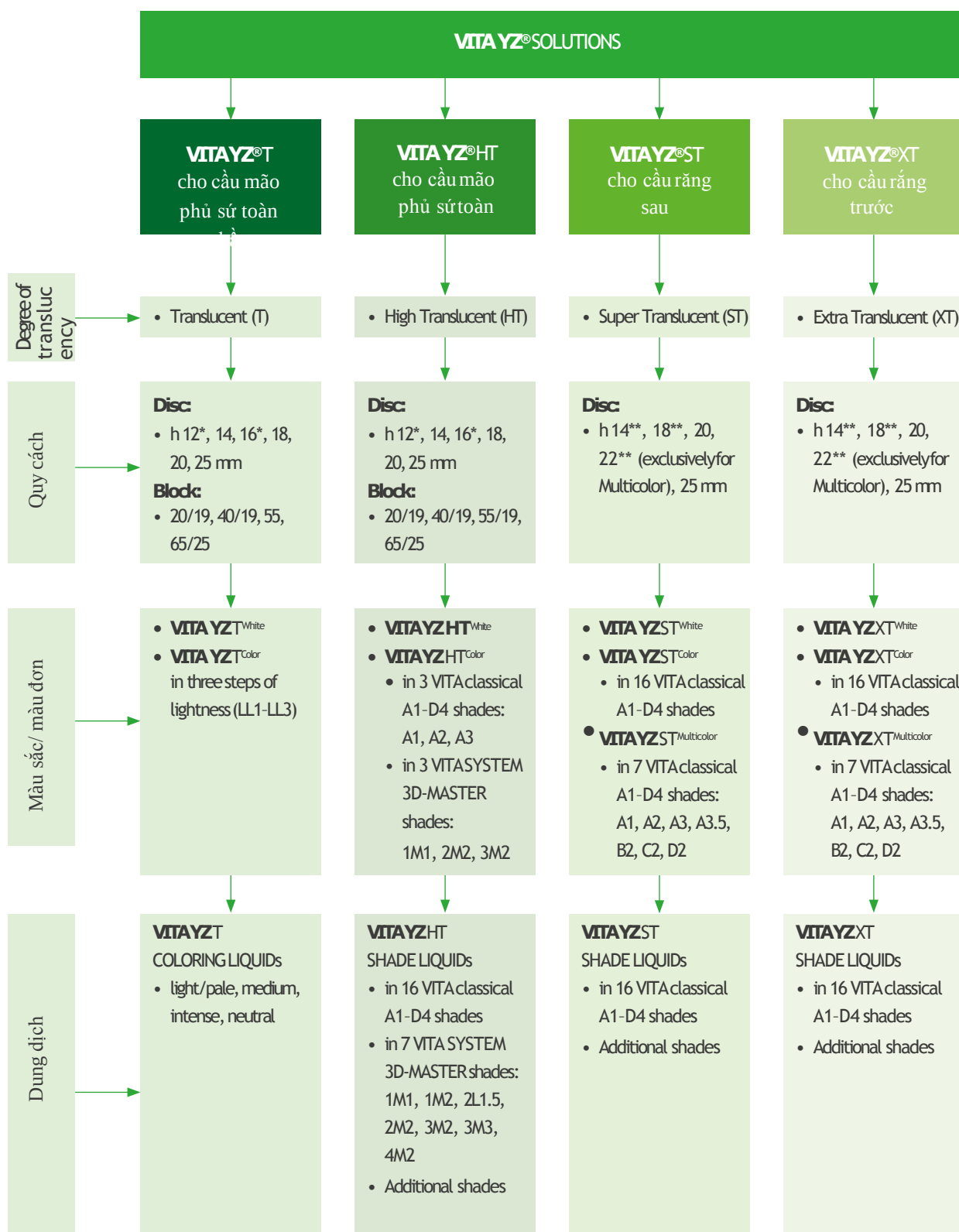

Note: The available range of geometries may differ with individual White and (Multi)Color variants.

*) These geometries are only available as uncolored VITA YZ^{White} versions.

**) VITA YZ^{Multicolor} is only available in: 14, 18, 22mm

Đề xuất và tính thẩm mỹ

VITA YZ®SOLUTIONS				
Độ trong	T Translucent	HT High Translucent	ST** Super Translucent	XT Extra Translucent
Chỉ định *				
	☐	☐	☒	☒
	☒	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☐
	☒	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☒	☒
	☐	☐	☒	☒
	☐	☐	☒	☒
	☐	☐	☒	☒
	☐	☐	☒	☒
	☐	☐	☒	☒

☐ đề xuất ☐ có thể ☒ không thể ☒ không đề xuất

Phục hình nguyên khối răng cửa phục hình phủ

Phục hình nguyên khối răng cối

sứ toàn phần/ từng phần răng cửa

phục hình phủ sứ toàn phần/ từng phần răng cối

*) Authorize VITA YZ T, HT and ST for reconstructions on natural tooth stumps and implants.

VITA YZ XT reconstructions are authorized only for restorations on natural tooth stumps.

The material-specific manufacturer information on minimal wall thicknesses and composite sections must be observed!

**) VITA YZ ST reconstructions are limited in Canada to a max. of six layers with a max. of two connected intermediate layers.